

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6 режимов работы
- 125 вариантов настроек в режиме Customized
- Настраиваемый таймер
- Частота колебаний щетинок – 31 000 в мин.
- Угол (диапазон) колебаний щетинок – 0–20°
- Частота колебаний насадки – 90–330 в мин.
- Угол (диапазон) колебаний насадки – 0–60°
- Материал корпуса – АВС-пластик
- Щетина – DuPont
- Влагозащита – IPX7
- Емкость аккумулятора – 2000 mAh
- Время полной зарядки аккумулятора – 16 ч.
- Аккумулятор держит заряд до 30 дней
- Потребляемая мощность – 5 Вт
- Номинальное напряжение – 3,7 В
- Размер изделия – 30x29,6x242 мм
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок щетки
- 2 сменные насадки
- Дорожный футляр на магнитной застежке
- Зарядная база с кабелем USB Type-C
- Кабель USB Type-C
- Инструкция по эксплуатации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Дата продажи _____

М.П. _____

ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА

СОБЕРИ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ

СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Ирригаторы



Ирригатор генерирует пульсирующую водную струю под давлением, которая вымывает зубной налет и микрочастицы пищи из труднодоступных мест ротовой полости. При этом происходит гидромассаж десен.

Зубные пасты



Зубная паста – дополнительное средство ухода за полостью рта. К ее выбору нужно подходить индивидуально, учитывая состав, предназначение, уровень абразивности и прочее.

Зубные нити



Нить эффективно очищает пространства между зубами. В ассортименте Revyline – плоские и круглые, воощенные и невоощенные нити.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

8 (800) 775-38-49
www.revyline.ru



REVYLINE

SONIC ELECTRIC TOOTHBRUSH
DOUBLE OSCILLATION

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА
С ДВОЙНЫМИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ

БЫСТРЫЙ СТАРТ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Осуществляется двумя способами: через кабель USB Type-C и с помощью зарядной базы.

Процесс зарядки отображается на дисплее.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НАСАДКИ

В базовой комплектации RL 080 PRO

2 сменные насадки:

Universal Anti-sensitive

При установке насадки оставляйте небольшой зазор между ней и корпусом для возможности осуществления вибрации.

Меняйте насадку раз в три месяца.

СЕНСОРНЫЕ ФУНКЦИИ

Индикация установленного режима


От прикосновения к корпусу щетки на дисплее высвечивается иконка, соответствующая ранее выбранному режиму.

Возврат насадки в стартовое положение

Насадка возвращается в стартовое положение от прикосновения к корпусу или при включении прибора.

ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ

На дисплее отображаются:

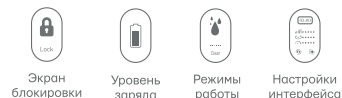

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Выбор режима работы осуществляется последовательным нажатием кнопки управления.



НАСТРОЙКИ ИНТЕРФЕЙСА

Чтобы выбрать настройки в режиме Customized, нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл до появления иконки.

Переход от иконки к иконке осуществляется с помощью кнопки управления, выбор нужного варианта – с помощью кнопки вкл/выкл.

Таймер 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00

Уровни интенсивности

Диапазон колебательных движений

Скорость

Сброс настроек Возврат

Диапазон (угол) колебательных движений.

ПРОЦЕСС ЧИСТКИ

- Намочите щетину и нанесите на нее пасту.
- Расположите насадку параллельно десне и включите щетку.
- Разделите полость рта на 4 условные зоны и очищайте их поочередно. Не давите на щетку сильно, головку перемещайте медленно, по необходимости совершая возвратно-вращательные движения.
- Автоматическое отключение щетки через 2 минуты ее работы предусмотрено во всех режимах, кроме Customized. В настраиваемом режиме таймер можно устанавливать в диапазоне от 1 до 3 минут.
- После завершения чистки прополощите рот чистой водой.

☹️	01:00	После отключения щетки происходит оценка чистки – на дисплее высвечиваются грустные или веселые смайлики.
😊	02:00	
😊	03:00	

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ЩЕТКИ

- Осуществляется длительным нажатием кнопки управления – на дисплее отображается или исчезает значок замочка.

Транспортировка, хранение и утилизация прибора:
Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.
Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией воздуха от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0°C до +20°C.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Импортер: ИП Обуховников М.А., г. Элиста, ул. Джангара, д. 7
Производитель: Ningbo Apiyo Biotechnology Co., Ltd., No.39, Xurong road, Ningbo, China/Китай | Сделано в Китае