

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4 режима работы RL 840
- 7 уровней давления в режиме DIY
- 2-минутный таймер
- Частота пульсации – 1600 в мин.
- Уровень давления жидкости – 210–900 кПа
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Влагозащита – IPX7
- Емкость резервуара – 200 мл
- Питание – аккумулятор Li-ion (1200 mAh)
- Потребляемая мощность – 9 Вт
- Номинальное напряжение – 3,7 В
- Зарядка через кабель USB Type-C
- Время полной зарядки – 3 ч.
- Аккумулятор держит заряд до 20 дней
- Размеры в сложенном состоянии – 60,9x43,4x141,8 мм
- Размеры в рабочем состоянии (без насадки) – 60,9x43,4x216,7 мм
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок ирригатора
- 2 сменные насадки
- Кабель USB Type-C
- Инструкция по эксплуатации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Дата продажи _____

М.П. _____

ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА

СОБЕРИ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ

СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Электрические звуковые зубные щетки



Благодаря интенсивным колебательным движениям щетины звуковая щетка эффективно очищает поверхности зубов, межзубные промежутки и полирует эмаль.

Чистящее средство



Чистящее средство для ирригатора используется для удаления известковых отложений и загрязнений с внутренних деталей прибора.

Бальзамы и ополаскиватели



Предназначены для гигиенического ухода, профилактики и лечения стоматологических заболеваний, а также для приготовления растворов для процедур ирригации.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

8 (800) 775-38-49
www.revyline.ru



REVYLINE

PORTABLE ORAL IRRIGATOR

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

GREEN

БЫСТРЫЙ СТАРТ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

- Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Туре-С.
- Перед использованием ирригатора полностью зарядите аккумулятор.
- В процессе зарядки ирригатора сначала загорается и мигает один индикатор, потом – второй и далее – третий.
- Когда зарядка завершена, все три индикатора горят не мигая.

НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ




В базовой комплектации RL 840
2 стандартные сменные насадки.

УСТАНОВКА И ХРАНЕНИЕ НАСАДКИ



Вставьте насадку в гнездо до щелчка. Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку блокировки и потяните насадку вверх.

Внимание! Не нажимайте кнопку блокировки насадки во время работы устройства.

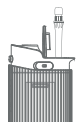

Насадку можно хранить в отделении для залива воды: откройте клапан, расположенный рядом с гнездом насадки, и поместите насадку внутрь наконечником вниз. Закройте клапан.

НАЧАЛО РАБОТЫ



Включение и выключение прибора осуществляется с помощью кнопки вкл/выкл, выбор режимов работы – с помощью кнопки управления.

Портативный ирригатор RL 840
позволяет использовать 4 режима работы:

● ● ●	○ ● ●	○ ● ●	● ● ●
Standard	Soft	Pulse	DIY

НАСТРОЙКА РЕЖИМА DIY



В режиме DIY нажмите и удерживайте кнопку управления (каждые 1–1,5 сек. давление будет возрастать). Отпустите кнопку, когда уровень давления будет вас устраивать.

UV LAMP



После использования прибора рекомендуем продезинфицировать резервуар. Для этого вылейте из него оставшуюся воду и в течение 2–3 секунд удерживайте кнопку вкл/выкл. Процесс стерилизации начнется сразу после включения УФ-лампы и автоматически завершится через 2 минуты.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА



Резервуар можно
наполнять двумя
способами.



ПРОЦЕСС ИРРИГАЦИИ

- Залейте в резервуар воду, температура которой не выше +40 °С, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
- Расположите насадку под углом 45° к поверхности зуба.
- Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки.
- Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину.
- Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.
- Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных промежутках.

В начале использования прибора выбирайте режим с низким уровнем давления, чтобы привыкнуть к ирригационной чистке и не травмировать десну.

Транспортировка, хранение и утилизация прибора:
Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.
Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0°С до +20°С.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Импортер: ИП Обушенков М.А., г. Элиста, ул. Джангара, д. 7
Производитель: Iconbeauty (ShenZhen) Holding Ltd.
7F, Block C, Idee Manto Industry Park, No.7002 Songbai Road, Guangming New Street, Shenzhen, China/Китай
Сделано в Китае